

## Recomendaciones:

- No es necesario retirar el colchón antillagas cuando el paciente requiera baño. El compresor debe apagarse y corroborar que se ha desinflado.
- Si el paciente desea pararse, debe apagarse el compresor. La presión que se ejerce mientras hay un apoyo sobre el colchón podría ocasionar un daño.
- El compresor puede usarse las 24 horas.
- Usar protector de colchón para conservar el equipo médico.
- Desinfectar frecuentemente según el baño y/o higiene que se le brinda al paciente.
- En caso de algún daño, llamar inmediatamente a SANA EN CASA para brindarle la atención correspondiente.

**"Consulta a tu médico para mayor información"**



## SANA EN CASA

Lic. Arturo B. de la Garza #117  
Col. Burócratas del Estado,  
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

[contacto@sanaencasa.org](mailto:contacto@sanaencasa.org)



## COLCHÓN ANTILLAGAS

Características, uso y  
recomendaciones



## ¿Qué es?

Los colchones antillagas son un dispositivo inflable que previene la formación de úlceras que habitualmente comienzan a aparecer en las personas que están constantemente en cama.

Aportan confort y comodidad al enfermo.



## ¿Cómo funciona?

Disminuye la presión que se genera en diversas zonas del cuerpo que permanecen apoyadas.

Posee conductos que inflan de aire de manera alternativa y son flexibles, por lo que evitan que haya presión continua en el cuerpo. Por lo tanto, procura evitar problemas circulatorios e hinchazón entre las piernas y pies.

También mitiga los dolores musculares y óseos debido a su constante movimiento de aire en sus conductos.

## Componentes

Se compone del colchón antillagas y de un compresor.

Dicho aparato cuenta con un interruptor, regulador de presión y unos colgadores que permiten situarlo en los pies de la cama.


## Instalación

Colocar el colchón antillagas es un procedimiento muy sencillo, de igual manera se les dan a conocer los pasos para que lo efectúen de la manera correcta y no presenten alguna complicación:

- Retire el colchón del paquete y desprenda cuidadosamente sobre la cama.
- Una vez que coloque el colchón sobre la cama, extiéndalo completamente y sujételo a la cama mediante el material de nylon que parecen ser sobrante del colchón antillagas.
- Cuelgue el compresor a la barandilla de la cama, generalmente se coloca en los pies de la cama.



Conecte la salida/entrada de aire al colchón.

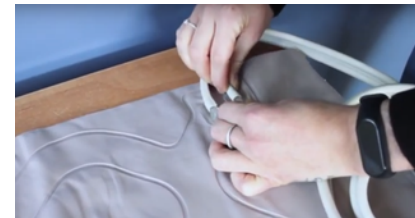

Conecte la salida de aire al compresor.



Conecte el cable eléctrico a la corriente y procesa a encender el aparato.



Gire el regulador de presión a la potencia adecuada según el peso del paciente o como lo indique su médico.

**El colchón antillagas está listo entre 15 a 20 minutos.**